

EYELA


...オイル交換時
漏れや汚れ

...重量のある
ポンプ

...作業が
大変な
設置位置

油回転真空ポンプの「オイル交換」 困っていませんか？

オイル交換時のさまざまな問題が 専用架台で解決します

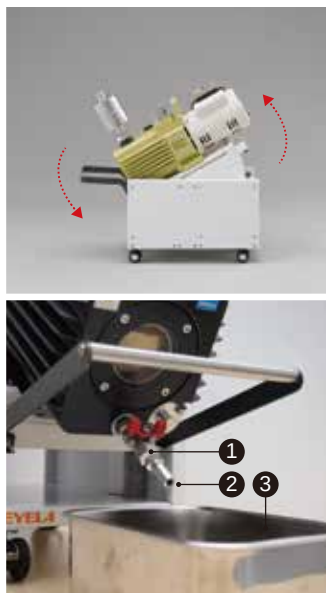

凍結乾燥機や真空乾燥器などで使用している油回転真空ポンプに専用架台を使用することで、重さを気にせずにオイルの交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく移動できます。

油回転真空ポンプ用架台 OPM-1000型

外寸法(mm)：246W×378(533)D×361H

製品コードNo.278230 価 格 ¥49,800

対応機種(ドレン口規格)

- ・GLD-051型(M10)、GCD-051X型(M10)
- ・GLD-137CN・202BN・202AN型(M12)
- ・GCD-136XN・201XN型(M12)
- ・GCD-136XN(200V)・201XN(200V)型(M12)



専用架台の詳細
動画は、こちら

オプション

① ドレン用コック(M10用)	製品コードNo.278770	価 格 ¥12,500
ドレン用コック(M12用)	製品コードNo.278780	価 格 ¥12,500
② ドレン用コックノズル(外径8mm)	製品コードNo.278940	価 格 ¥ 2,500
ドレン用コックノズル(外径12mm)	製品コードNo.278950	価 格 ¥ 2,500
③ 排油受用バット	製品コードNo.278790	価 格 ¥ 6,000

東京理化器械株式会社

水系試料向けの小型高性能GLD型 有機溶媒対応の耐食タイプGCD型 油回転真空ポンプ

GLD・GCD型



■逆流防止機構、ガスバラストバルブ、強制給油方式、過電流保護回路、強制空冷方式など、安全面への配慮をしています。

■GCD型は個々の部品に無電解ニッケルメッキ処理を施し、その他の板金、スプリング材料はSUS316製、パッキン、Oリングはフッ素ゴムを使用することにより耐食性が向上しました。

オプション 真空ホース			
内径×外径	長さ	製品コードNo.	価 格
15×36mm	1m	263450	¥11,500
	2m	263440	¥22,800
	3m	263430	¥34,000
	5m	217910	¥54,400
18×42mm	1m	263480	¥12,500
	2m	263470	¥25,800
	3m	263460	¥38,500
	5m	119230	¥60,000

型 式	GLD-051	GLD-137CN	GLD-202BN	GLD-202AN (200V)
製 品 コード No.	190840	270580	270600	270590
性 能	排気速度(50/60Hz)	50/60L/min	135/162L/min	200/240L/min
能	到達真空度	0.67Pa(約 5×10^{-3} Torr)		
モ	一	出力200W	出力400W	出力550W
安 全 機 能	サーマルプロテクター、逆流防止弁			逆流防止弁
規 格	使用オイル(SMR型)	500~800 mL	1000mL	1100mL
吸 引 管 口 径	外径18mmホース口	外径22mmホース口		
外 寸 法(W×D×Hmm)	150(165.5)×390(395)×247	170×487.5×256	170×515.5×256	170×513.5×256
質 量	13.9kg	約29kg	約31kg	約29kg
電 源 入 力・電 源 電 圧	5.6/4.8A・AC100V 50/60Hz	6.8/5.8A・AC100V 50/60Hz	8.2/7.9A・AC100V 50/60Hz	3.0/2.7A・AC200V 50/60Hz 三相
価 格	¥153,000	¥193,000	¥228,000	¥228,000

型 式	GCD-051X	GCD-136XN	GCD-201XN	GCD-136XN(200V)	GCD-201XN (200V)
製 品 コード No.	190850	189160	189190	189170	189180
ポンプヘッド耐食処理	特殊表面処理				
性 能	排気速度(50/60Hz)	50/60L/min	135/162L/min	200/240L/min	135/162L/min
能	到達真空度	0.67Pa(約 5×10^{-3} Torr)			
モ	一	出力200W	出力400W	出力550W	出力700W
安 全 機 能	サーマルプロテクター、逆流防止弁			逆流防止弁	
規 格	使用オイル(SO-M型)	500~800mL	1000mL	1100mL	1000mL
吸 引 管 口 径	外径18mmホース口	外径22mmホース口			
外 寸 法(W×D×Hmm)	150(165.5)×390(419)×232.7	170×466(493)×256.7	170×514.5(541.5)×256.5	170×436.5(463.5)×256.7	170×482.5(509.5)×256.7
質 量	14.1kg	25.4kg	29.4kg	22.8kg	26.6kg
電 源 入 力・電 源 電 圧	5.6/4.8A・AC100V 50/60Hz	7.7/6.1A・AC100V 50/60Hz	8.0/7.2A・AC100V 50/60Hz	1.9/1.8A・AC200V 50/60Hz 三相	3.45/3.08A・AC200V 50/60Hz 三相
価 格	¥233,000	¥283,000	¥354,000	¥283,000	¥354,000

※使用周囲温度範囲は7~40℃です。※到達真空度はピラニ真空計による測定値です。(マクラウド真空計による測定の場合、1桁低い値になります。)

※()内の寸法は突起物を含みます。✕電源プラグおよび電源コードは付属していません。

東京理化学株式会社 <https://ssl.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター ☎0120-076-554

札幌 Tel.011-709-8101 埼玉 Tel.048-722-3713 神奈川 Tel.0463-21-4321
 仙台 Tel.022-227-3761 千葉 Tel.043-275-0043 静岡 Tel.054-267-1616
 那須 Tel.0287-62-6000 東京 Tel.03-6757-3388 名古屋 Tel.052-571-3171
 筑波 Tel.029-851-8241 横浜 Tel.045-473-5477 関西 Tel.06-6131-0905

広島 Tel.082-511-1531
 福岡 Tel.092-621-5870

※製品の外観・仕様は改良のため変更することがあります。予めご了承ください。

※価格は2019年12月現在のものです。

※消費税は含んでいません。

OIL_1912